


ULTRA

BEZINWAZYJNY
LIFTING TWARZY
I ODMŁADZANIE SKÓRY

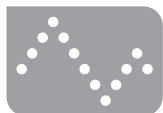

ULTRA

Bezinwazyjny Lifting Twarzy i Odmładzanie Skóry

Po ponad 20 latach przeprowadzonych badań stworzono urządzenie CACI, które zostało wybrane i nagrodzone jako najbardziej skuteczna terapia anti-aging dostępna na rynku*.

Urządzenie CACI Ultra łączy możliwość przeprowadzenia Bezinwazyjnego Liftingu Twarzy oraz Odmładzania Skóry. System łączy w sobie 4 technologie: MICROCURRENT (mikroprądy), ULTRASONIC PEELING (peeling kawitacyjny), HYDRATONE (nawilżanie) oraz WRINKLE COMB (terapia światłem LED).



GRZEBIEŃ LED (TERAPIA ŚWIATŁEM LED)

Grzebień LED to połączenie fotostymulacji światłem LED z mikroprądami o wysokiej częstotliwości. Synergia tych dwóch technologii wypełnia od wewnątrz zmarszczki i wygładza skórę, zmniejsza też rozstępy. Jest to bezinwazyjna i bezbolesna alternatywa dla zabiegów medycyny estetycznej polegających na iniekcji kolagenu i innych dermo-wypełniaczy.

System CACI posiada opcję wyboru czerwonego lub niebieskiego światła LED oraz opcję wyboru strumienia światła LED, który jest wyjątkowo efektywny przy leczeniu trądziku oraz innych zmian skórnych. Czerwone światło LED posiada uzdrawiające i biostymulujące działanie na skórę. Niebieskie światło LED działa antybakteryjnie i kojąco na podrażnienia i stany zapalne skóry.

TERAPIA ŚWIATŁEM LED

- Pobudza skórę do odnowy
- Koi i łagodzi stany zapalne
- Pomaga w leczeniu trądziku



Rewolucyjny zabieg odmładzający skórę

GRZEBIEŃ LED



PRZED



PO

Niektóre długości fal światła LED w połączeniu z mikroprądami o wysokiej częstotliwości aktywują pompę sodowo-potasową. Wspomaga to wymianę komórkową, uwalnianie jonów sodowych, protein kolagenu oraz glikozaminoglikanów kwasu hialuronowego. Efektem jest wypełnienie zmarszczek od wewnątrz i pobudzenie odnowy komórkowej i procesów naprawczych w skórze.



PEELING KAWITACYJNY

Urządzenie do peelingu kawitacyjnego emituje ultradźwięki o wysokiej częstotliwości (27 000/sekundę). Ultradźwięki powodują powstanie pęcherzyków gazowych w cieczy naniesionej na skórę, które to zjawisko nazywane jest kawitacją.

W ten właśnie sposób ultradźwięki oczyszczają skórę z zanieczyszczeń oraz delikatnie złuszczają górne warstwy naskórka. Peeling kawitacyjny jest delikatniejszą metodą złuszczenia naskórka niż tradycyjna mikrodermabrazja.



HYDRATONE - NAWILŻANIE I ODMŁADZANIE

W zabiegu Hydratone połączono działanie elektrod zakończonych kulkami z Hydro Maską - unikalną, przewodzącą prądy, silikonowo-żelową maską, która ma spektakularne działanie nawilżające.

Kulkowe elektrody delikatnie masują twarz, a w tym czasie maska zostaje naładowana elektrycznie, dzięki czemu cała twarz „skąpana” jest w odmładzającej energii. Prąd dostarczany przez rolki do skóry uzupełnia potencjał bio-elektryczny w mięśniach twarzy, dzięki czemu stają się one bardziej elastyczne i jędrne.



KORZYŚCI Z PEELINGU KAWITACYJNEGO

Pod wpływem ultradźwięków zniszczone zostają również komórki bakterii skórnych. Po ustawieniu innej częstotliwości emitowanych fal można też wykorzystywać to urządzenie do zabiegu sonoforezy, czyli zwiększyć absorpcję preparatów pielęgnacyjnych aplikowanych na skórę.

- Głęboko oczyszcza i delikatnie złuszcza naskórek
- Niszczy bakterie skórne
- Zwiększa absorpcję składników aktywnych zawartych w preparatach pielęgnacyjnych
- Poprawia krążenie krwi


ZWIĘKSZ SWOJE PRZYCHODY DZIĘKI URZĄDZENIU CACI ULTRA

Kupując urządzenie CACI ULTRA, kupujesz więcej niż tylko urządzenie do wykonywania zabiegów kosmetycznych. Otrzymujesz też możliwość wykonywania zabiegów anti-aging na światowym poziomie, które pomogą rozwinąć Twój biznes.


Niech sukces CACI stanie się też Twoim udziałem! To marka, która zwiększy Twoje dochody.

*Przy założeniu, że zabiegi wykonywane są przez 6 dni w tygodniu, a 1 zabieg kosztuje 250 zł

PRZYCHÓD TYGODNIOWY

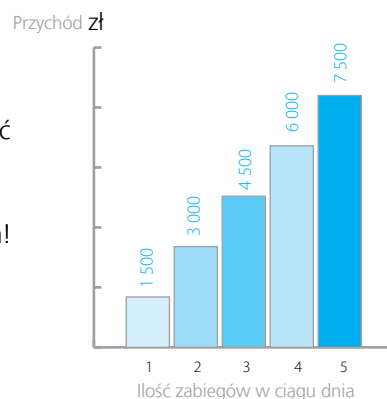

PRZYCHÓD ROCZNY

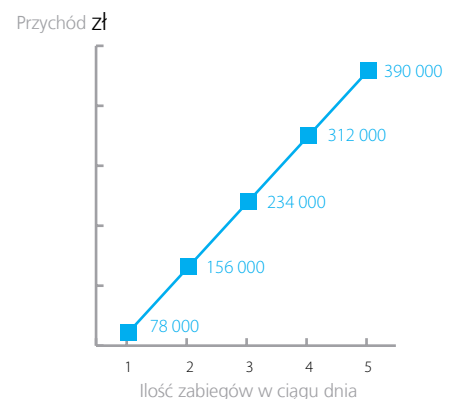

MIKROPRĄDY

Mikroprądy pierwotnie stosowane były do leczenia porażenia nerwu twarzowego, a obecnie terapia z wykorzystaniem mikroprądów jest szeroko stosowanym zabiegiem przeciwstarzeniowym.

W praktyce wykorzystuje się mikroprądy o natężeniu mniejszym niż 1 mA (<1mA), ponieważ współgrają one harmonijnie z polem bioelektrycznym naszego ciała. Zastosowanie wyższego natężenia wywołuje skurcze mięśni twarzy, co może przyczynić się do pogłębienia się zmarszczek i linii mimicznych. Nasze mikroprądy nie wywołują skurczu mięśni, lecz działają reedukująco na mięśnie i w ten sposób uzyskuje się pożądany efekt.

Ze względu na spektakularne efekty liftingujące i tonizujące, osiągnięte po zabiegu z wykorzystaniem mikroprądów urządzenia CACI, zabieg ten jest porównywany do liftingu chirurgicznego.



82 DOSTĘPNE PROGRAMY

ZABIEGI

Lifting twarzy	✓
Splywanie zmarszczek i linii	✓
Zmniejszanie opuchnięć pod oczami	✓
Nawilżanie skóry	✓
Peeling skóry	✓
Leczenie zmian trądzikowych i zanieczyszczeń skórnych	✓
Zabieg na szyję	✓
Zabieg antycellulitowy (z ECM)*	✓
Likwidowanie rozstępów	✓
Zabieg na dłonie	✓

* wyposażenie dodatkowe

ELEKTRO-APLIKATORY



Urządzenie CACI wykorzystuje specjalnie opracowane bawełniane aplikatory wypełnione serum, które przyspieszają i utrwalają rezultaty zabiegu. Serum zawiera heksapeptydy i inne aktywne składniki o działaniu anti-aging, dzięki czemu efekt liftingu twarzy widoczny jest od razu. Elektro-aplikatory nadają się również idealnie do sprzedaży detalicznej.

MASAŻER ANTICELLULITOWY (ECM)




ECM to wyposażenie dodatkowe, które może być dołączone do każdego urządzenia CACI posiadającego funkcje mikroprądów. W urządzeniu ECM wykorzystane jest połączenie dobroczynnego wpływu masażu z efektywnością terapii mikroprądowej.

Rolki przewodzące emitują mikroprądy, które delikatnie stymulują zmęczone ramiona, łagodzą bóle kończyn i wzmacniają zwiótczałe mięśnie. Masażer Antycellulitowy wzmacnia mięśnie i zmniejsza obwody ciała poprzez pobudzenie drenażu limfatycznego i rozbijanie złożeń tłuszczowych.

“ Jestem zachwycona urządzeniem CACI, podobnie jak moi klienci – podczas spotkania na którym prezentowaliśmy CACI zwróciło mi się 50% nakładów na to urządzenie, choć była to pierwsza prezentacja tego produktu. Od tego czasu jesteśmy wręcz zalewani ilością zgłoszeń od klientów chcących zapisać się na zabieg CACI ”

Candice White
Beauty Salon, Bristol

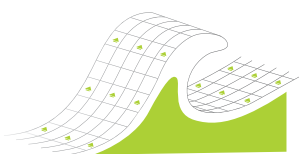

**UNIKALNOŚĆ
URZĄDZENIA CACI**

Wszystkie urządzenia CACI wytwarzają mikroprądy o ultra niskiej częstotliwości, a moc jest sterowana cyfrowo.

To specjalistyczne oprogramowanie optymalizuje efekty i komfort zabiegu poprzez stopniowe zwiększanie mocy zabiegu aż do pokonania oporności skóry (prawo Ohma). Następnie urządzenie osiąga szczytową moc przewodząc energię mikroprądów głęboko do mięśnia.



Ekran dotykowy

DANE TECHNICZNE

Wymiary (cm): 45 x 42 x 15

Waga: 9 kg

Ekran dotykowy: 10,4"

Zasilanie: 60 - 240 V

Napięcie wyjściowe: 30 V (maksymalnie)

Zużycie: 110 VA

Klasa bezpieczeństwa 1 typ BF: zgodnie z IEC 601 i IEC 601-2-10

Kanały: 4 niezależne

MIKROPRĄDY

Biegunowość: dodatnia, ujemna i naprzemienna

Zakres: 20 uA do 640 uA

Częstotliwość: 0,1 Hz - 800 Hz

Kształty fali: 8

Tryb pracy: automatyczny sekwencyjny

ZESTAW ULTRADŹWIEKOWY

Organia mechaniczne: 30 micro +/- 20%

Częstotliwość: 27 000 Hz +/- 10%

GRZEBIEŃ LED

Wyjście: 0,1 mA - 8 mA

Częstotliwość wyjścia: 6000 Hz

Lampy LED 5 x niebieskie 430 nm - 40 mW

Lampy LED 5 x czerwone 640 nm - 30 mW